DESIGNED TO COVER

카테터를 안으로.
보호를 일상으로.

카테터 출구 부위와 외부 튜브를
감싸는 방수 커버, Gover.

방수 보호


피부에 붙이는 접착부와
외부 카테터를 안쪽으로 감싸는 본체.

안쪽 상태 확인

투명·반투명 소재를 통해
카테터 부위의 상태를 살펴볼 수 있습니다.

물 유입 확인

브로셔에 안내된 색상 변화 기능.
손상 또는 땀·습기에 의한 변색 시 교체하세요.

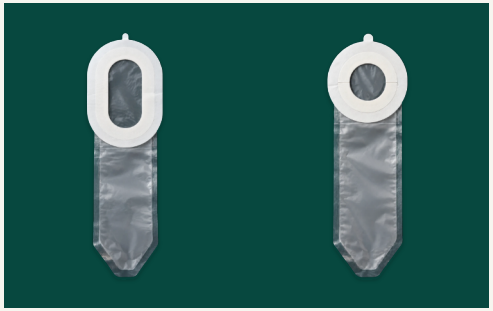

타원형 / 원형

타입 선택은 의료진 및 판매처에 확인해 주세요.

GOVER / PRODUCT OVERVIEW

BEFORE & AFTER USE

사용 전후,
확인해 주세요.

- 제품이 손상되면 즉시 교체하세요.
- 땀·습기로 테이프가 변색되면 교체하세요.
- 알레르기·가려움·통증이 생기면
  의료진과 상담하세요.
- 감염이 의심되면 병원을 방문하세요.
- 흉부 이외에는 사용하지 마세요.

판매처 · 가야엔터프라이즈

문정우

010-2586-6198

gayaofficial@gmail.com

서울 서초구 사평대로52길 1
대경빌딩 301호

제조원 · (주)에이치케이

대표 양동진 · 031-406-8861
경기도 안산시 단원구 별망로 419
광양프런티어밸리 지식산업센터 410·411호

gover.store

제품 구매 · 기관 도입 문의

Gover®

WATERPROOF CATHETER COVER

물로부터 보호하고,
일상을 이어가세요.

거버 방수 카테터 커버



거버 방수 카테터 커버 · gover.store

부착 전 준비

01

카테터 부위를 소독합니다.

담당 의료진의 카테터 관리 지침에 따라
부위를 준비합니다.

02

제품과 포장을 확인합니다.

손상 여부를 확인한 뒤,
오염되지 않게 포장을 제거합니다.



사용법은 제공된 원본 브로셔를 기준으로 정리했습니다.

감싸고, 붙이기

03

카테터를 안쪽으로 넣습니다.

제품 아래쪽으로 카테터를 삽입하여
접착 부위까지 감싸 넣습니다.

외부 카테터가 커버 안쪽에 들어가는 단계입니다.

04

이형지를 떼고 밀착합니다.

안쪽 접착테이프의 위·아래 종이를
차례로 제거하고 피부에 단단히 붙입니다.

제품에 동봉된 설명과 의료진의 지침을 우선해 주세요.

확인하고, 고정하기

05

접착 상태를 확인합니다.

잘 붙었는지 확인한 뒤,
접착테이프 바깥쪽 커버를 제거합니다.

06

아래쪽을 고정합니다.

동봉된 테이프로 카테터 아래쪽을 고정합니다.
사용 전 부착 상태를 다시 확인합니다.

수영·입욕 등 침수 환경의 사용 여부와 조건은
판매처와 담당 의료진에게 확인해 주세요.
개인의 카테터 관리 지침을 우선해 주세요.