Gover®

WATERPROOF CATHETER COVER / CARE GUIDE

사용 전, 여섯 단계를 확인하세요.

카테터 출구 부위와 외부 튜브를 감싸는 방수 커버.
제품에 동봉된 설명과 담당 의료진의 지침을 우선해 주세요.

01 **카테터 부위를 소독합니다.**
담당 의료진의 카테터 관리 지침에 따라 부위를 준비합니다.

02 **제품 손상 여부를 확인합니다.**
오염되지 않게 포장을 제거합니다.

03 **카테터를 안쪽으로 넣습니다.**
제품 아래쪽으로 카테터를 넣어 접착 부위까지 감싸 넣습니다.

04 **이형지를 떼고 피부에 붙입니다.**
안쪽 접착테이프의 위·아래 종이를 차례로 제거하고 피부에 단단히 붙입니다.

05 **잘 붙었는지 확인합니다.**
접착테이프 바깥쪽 커버를 제거합니다.

06 **아래쪽을 고정합니다.**
동봉된 테이프로 카테터 아래쪽을 고정합니다.

사용 전후 확인 사항


제품 손상 또는 땀·습기에 의한 테이프 변색 시 교체하세요.
알레르기·가려움·통증은 의료진과 상담하고, 감염이 의심되면 병원을 방문하세요.
흉부 이외에는 사용하지 마세요.

판매처 가야엔터프라이즈 · 문정우
010-2586-6198 · gayaofficial@gmail.com

제조원 (주)에이치케이 · 대표 양동진
gover.store

원본 브로셔의 사용 안내

아래는 제공된 제품 브로셔 원문입니다. 앞쪽 안내는 이 자료의 사용 순서와 주의사항을 읽기 쉽게 정리했습니다.

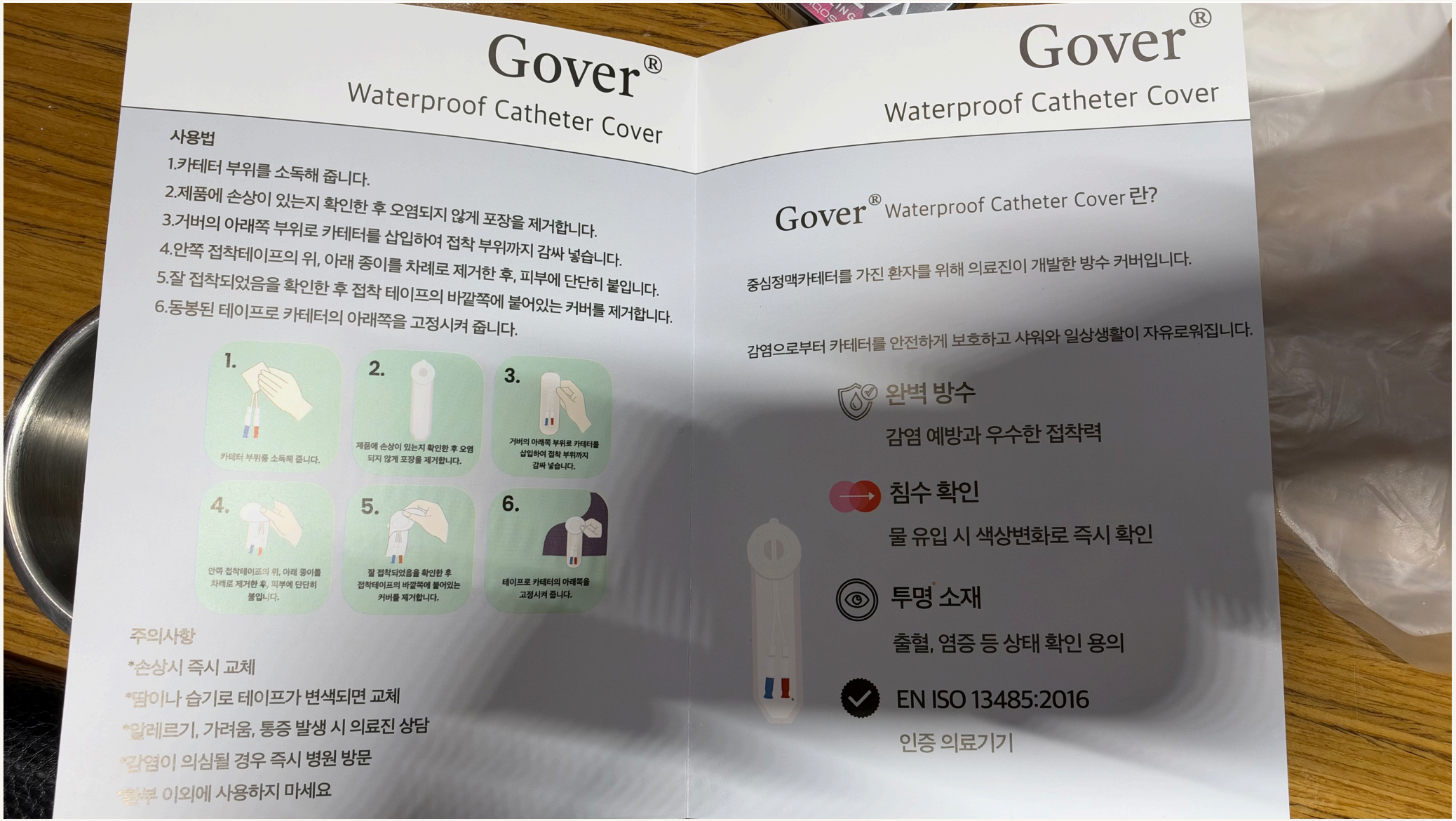

Gover®

Waterproof Catheter Cover

사용법

1.카테터 부위를 소독해 줍니다.
2.제품에 손상이 있는지 확인한 후 오염되지 않게 포장을 제거합니다.
3.거버의 아래쪽 부위로 카테터를 삽입하여 접착 부위까지 감싸 넣습니다.
4.안쪽 접착테이프의 위, 아래 종이를 차례로 제거한 후, 피부에 단단히 붙입니다.
5.잘 접착되었음을 확인한 후 접착 테이프의 바깥쪽에 붙어있는 커버를 제거합니다.
6.동봉된 테이프로 카테터의 아래쪽을 고정시켜 줍니다.

1. 카테터 부위를 소독해 줍니다.
2. 제품에 손상이 있는지 확인한 후 오염되지 않게 포장을 제거합니다.
3. 거버의 아래쪽 부위로 카테터를 삽입하여 접착 부위까지 감싸 넣습니다.
4. 안쪽 접착테이프의 위, 아래 종이를 차례로 제거한 후, 피부에 단단히 붙입니다.
5. 잘 접착되었음을 확인한 후 접착 테이프의 바깥쪽에 붙어있는 커버를 제거합니다.
6. 테이프로 카테터의 아래쪽을 고정시켜 줍니다.

주의사항

*손상시 즉시 교체
*땀이나 습기로 테이프가 변색되면 교체
*알레르기, 가려움, 통증 발생 시 의료진 상담
*감염이 의심될 경우 즉시 병원 방문
*항부 이외에 사용하지 마세요

Gover®

Waterproof Catheter Cover

Gover® Waterproof Catheter Cover 란?

중심정맥카테터를 가진 환자를 위해 의료진이 개발한 방수 커버입니다.

감염으로부터 카테터를 안전하게 보호하고 샤워와 일상생활이 자유로워집니다.

완벽 방수
감염 예방과 우수한 접착력

침수 확인
물 유입 시 색상변화로 즉시 확인

투명 소재
출혈, 염증 등 상태 확인 용의

EN ISO 13485:2016
인증 의료기기